

IMAGE SUITE – JETZT NOCH BESSER.

Die Image Suite V4-Software setzt in Bezug auf die Workflow-Effizienz neue Maßstäbe für kleinere Einrichtungen. Diese zuverlässige Software ist mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen ausgestattet, der sich so einfach wie nie zuvor bedienen lässt. Verbesserte Werkzeuge, ein optimierter Workflow und eine höhere Bildqualität sind nur einige der Eigenschaften dieser Lösung der nächsten Generation. Unser fortschrittliches „Mini-PACS“-Modul ermöglicht eine exzellente Bildverwaltung und -analyse und ist nun vollkommen optional. Beschaffen Sie sich die von Ihnen benötigten hochwertigen Bilder mit einem für Sie optimal geeigneten System – zu einem überaus kostengünstigen Preis.



**INTUITIV.
FLEXIBEL.**

DIE IMAGE SUITE VEREINT DIE VON IHNEN BENÖTIGTEN VORTEILE.

Kostengünstig

Die Image Suite wurde entwickelt, damit private Praxen und kleinere Kliniken Kosten sparen können. Und da das Mini-PACS-Modul nun völlig optional erhältlich ist, können Sie diese Funktion bei Bedarf hinzufügen.

Benutzerfreundlich

Unsere Benutzeroberfläche der nächsten Generation ermöglicht einen beispiellos intuitiven Betrieb. Eine kurze Einarbeitung bedeutet, dass Ihre MTRAs im Nu Bilder auf professionelle Weise aufnehmen, verarbeiten, bearbeiten und speichern. Sie werden sehen, Ihre Effizienz und Produktivität werden in die Höhe schnellen.

Leistungsfähig

Dieses kleine, leistungsstarke System sorgt für eine zuverlässige, automatische Bildverarbeitung und stellt fortschrittliche Bearbeitungs- und Messwerkzeuge sowie Funktionen zur Bildausschuss-Analyse bereit. Durch die Remote-Auftragserfassung und PACS-Zugriff/-Reporting erhalten Sie die Flexibilität, das System in Ihrer gesamten Einrichtung einsetzen zu können.


Flexibel

Das System lässt sich problemlos an die individuellen Anforderungen Ihrer Einrichtung anpassen. Erwerben Sie jetzt die von Ihnen benötigten Funktionen, und fügen Sie später, wenn Ihre Praxis wächst, weitere Merkmale hinzu.



DRX-Detektoren

PERFEKTE GEFÄHRTEN – CARESTREAM DR SYSTEME + LASERDRUCK

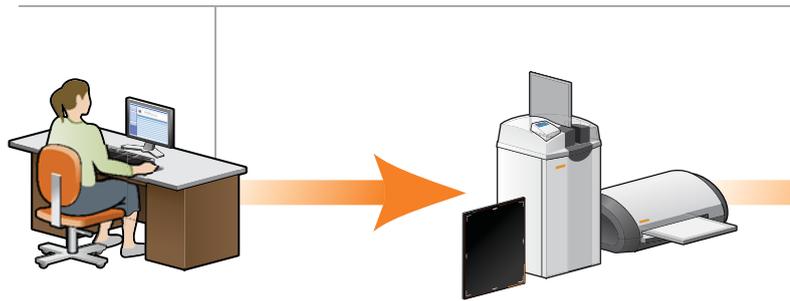

PLANEN

AUFNEHMEN

PLANEN

Schnellerer Registrierungsvorgang – von überall

- Führen Sie mithilfe von webbasierter Software eine Remote-Registrierung von Patienten durch.
- Auswahlgrafiken ermöglichen eine schnelle und einfache Festlegung der Körperteile und Ansichten.
- Fügen Sie neue Körperteile und Ansichten hinzu, bearbeiten Sie vorhandene Körperteile und Ansichten oder wenden Sie benutzerdefinierte Verarbeitungsvorgänge an.
- Sorgen Sie durch Verbindung mit DICOM- oder HL7-konformen EPA/RIS-Systemen für einen vereinfachten Workflow.

AUFNEHMEN

Schnelle und einfache Aufnahme hochwertiger Bilder durch Kopplung der Image Suite mit Carestream CR- und DR-Systemen

- Sie können Bilder von bis zu zwei kabellosen oder kabelgebundenen DRX-1-Systemen sowie von Vita- und Classic CR-Systemen aufnehmen.
- Die mit einem Touchscreen versehene Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache Navigation und damit besseren Benutzerkomfort.
- Vertrauen Sie auf eine gleichbleibende Bildqualität, mit optimierter Darstellung – automatischer Bildverarbeitung (EVP+).
- Profitieren Sie von klinischen Tools und Anwendungen, darunter Kreismaskierung, Histogramm, Analyse, ROI-Pixelwert usw.
- Sorgen Sie durch Verwendung von Bezugsbildern für die Positionierung und beispielhaften Röntgenbildern für eine verbesserte Bildqualität und einen schnelleren Workflow.
- Führen Sie Mammografien mit DIRECTVIEW Classic CR durch.*
- Verwenden Sie die Funktion zur Bildausschuss-Analyse, um Probleme mit Untersuchungen nachzuverfolgen.
- Sie haben die Möglichkeit, DFP- und Verfahrensdaten zu erfassen, sodass eine manuelle Eingabe nicht erforderlich ist.

ARESTREAM IMAGE SUITE SOFTWARE + CR + CHECKER



ANZEIGEN/BEARBEITEN

Qualitativ hochwertige Bilder

- Verbessern Sie Workflow und Produktivität mithilfe des einfachen, benutzerfreundlichen Aufnahmebildschirms der Image Suite.
- Passen Sie die Bildverarbeitung per Klick an. Nutzen Sie einfach die entsprechenden Schieberegler, um Helligkeit, Kontrast oder Details über den Aufnahmebildschirm einzustellen.
- Steigern Sie Ihre Produktivität durch bis zu acht gleichzeitige Web Viewer-Sitzungen.
- Verwenden Sie spezielle Messwerkzeuge für Anwendungen in der Chiropraktik, Orthopädie oder Mammografie†.
- Mit dem Editor für automatisches und manuelles Stitching können Sie einzelne Bilder manipulieren und zusammenfügen und so genau die Langformat-Ansicht erstellen, die Sie benötigen.
- Greifen Sie mit dem Tablet Viewer auf einem iPad auf Patientenaufnahmen und -berichte zu.*

DIAGNOSE/BERICHT

Schnellere Diagnosen, bessere Patientenversorgung

- Steigern Sie die Produktivität durch gleichzeitiges Anzeigen mehrerer Bilder durch Unterstützung von zwei Monitoren auf Web-Clients.
- Bilder können mithilfe optionaler DICOM Store SCP-Software von CT-, MR-, Ultraschall- und zusätzlichen CR-/DR-Systemen empfangen werden.
- Generieren/Überprüfen Sie Berichte auf mehreren Web-Clients in der gesamten Einrichtung.
- Führen Sie mithilfe der Qualitätssicherungs-Tool-Software der Image Suite Systemqualitätstests durch.
- Übertragen Sie DICOM-Bilder sicher über das Internet, ohne dabei auf VPN oder verschlüsselte Tunnelverbindungen angewiesen zu sein. Möglich macht dies OmniLink, eine für mobile Anwendungen ideal geeignete Software.

DRUCKEN/ARCHIVIEREN

Effiziente Weitergabe und Speicherung von Bildern

- Maximieren Sie die Sicherheit mit bei Bedarf oder geplant durchgeführten Sicherungen.
- Führen Sie zwecks Offline-Speicherung Backups auf CDs und USB-Wechsellaufwerke durch.
- Optimieren Sie die Gebrauchstauglichkeit von Bildern mit JPEG- oder DICOM-Export-Werkzeugen.
- Nutzen Sie unterstützte Multi-Format-Druckkomposition mit unabhängigen Bildbearbeitungsfunktionen.



DirectView Vita CR



DRYVIEW 5700 Laser Imager


* Nicht in den USA verfügbar.

† Spezielle Tools für Mammografie nicht in den USA verfügbar.

DIE IMAGE SUITE-LÖSUNG.

Ein umfassendes System zum Erfassen und Managen digitaler Bilder.

DIRECTVIEW
Classic CR

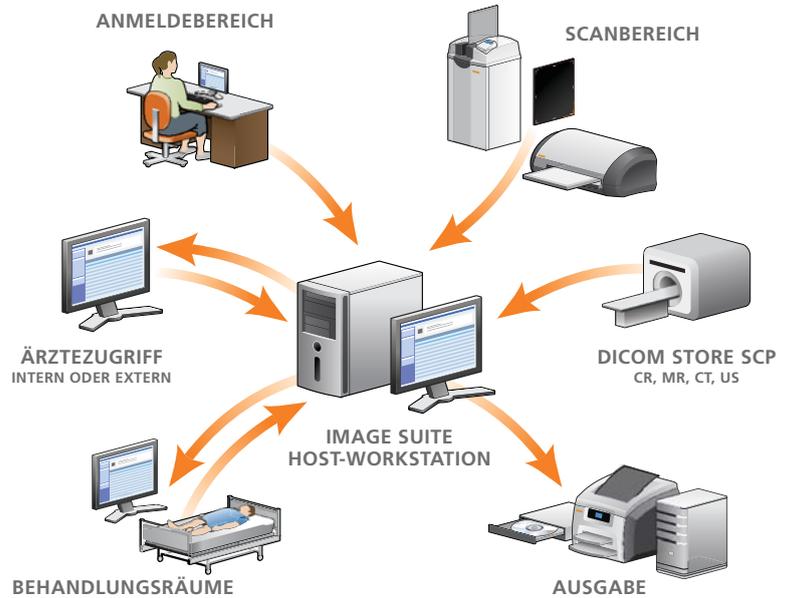

Verfügbare Optionen für Image Suite/V4-Software

- Software für klinische Befunde
- Software für Mini-PACS-Archivierung
- Bis zu 8 Web Viewer-Lizenzen
- Langformat-Imaging-Kassetten/Bodenstative
- DICOM Store SCP (Service Class Provider)
- TQT-Phantom
- Erweiterte Messwerkzeuge
- Mammografie-Software†
- Lizenz für Software zur Erhöhung der Speichergrößen für Aufnahmen
- Lizenz für Online-Terminbuchungssoftware für mehrere Instanzen
- OmniLink-Paket
- Tablet Viewer Software*

Service- und Support-Community.

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres Kundennetzwerks. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Bildgebungsleistung für unsere Kunden und unterstützen Sie bei Veränderungen Ihrer Anforderungen mit Innovationen, die Ihnen helfen, Ihr Budget und Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Das Kundennetzwerk von Carestream bietet Ihnen ein dynamisches Expertenteam und eine zentrale Anlaufstelle für den einfachen und individuellen Zugang zu den richtigen Spezialisten in jeder Situation. Sie und Ihre Patienten profitieren von den Vorteilen und besten Praktiken, die Carestream aus der Erfahrung von über 100 Jahren Innovation in der medizinischen Bildgebung und im Umgang mit Tausenden von Kunden weltweit entwickelt hat.



www.carestream.de



© Carestream Health, 2013. CARESTREAM, DIRECTVIEW und DRYVIEW sind Marken von Carestream Health. Kat.-Nr. 200 0102_DE 12/13

* Nicht in den USA verfügbar.

† Spezielle Tools für Mammografie nicht in den USA verfügbar.

Carestream