



CARESTREAM DRX-1 / DRX-1C

CARESTREAM DRX-1 / DRX-1C Pierwszy na świecie bezprzewodowy detektor DR o wymiarach standardowej kasety 35x43cm, pozwalający na integrację i ucyfrowienie aparatów analogowych za pomocą technologii radiografii bezpośredniej DR. Stacja technika systemu jest w pełni kompatybilna z urządzeniami Carestream CR i DR. Urządzenie może być zdalnie nadzorowane i serwisowane. Detektor Carestream Health DRX-1C pracuje w technologii Gos lub Csl.



CARESTREAM DRX Evolution

CARESTREAM DRX Evolution. Nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym wykorzystujący detektory DRX-1. System składa się z zawieszenia sufitowego lampy rtg, stołu kostnego (opcjonalny) i stojaka płucnego (stacjonarny lub mobilny), generatora wysokiego napięcia 65kW lub 80kW oraz stacji technika z monitorem dotykowym LCD 19 cali. System umożliwia wykonywanie ekspozycji w stojaku płucnym, stole kostnym oraz na łóżkach mobilnych lub wózkach w gabinecie. Duży wyświetlacz zamocowany na lampie pozwala na pełną komunikację z generatorem i umożliwia ustawianie lub korygowanie parametrów ekspozycji bezpośrednio przy pacjencie.

CARESTREAM DRX Ascend

CARESTREAM DRX Ascend. Wysoka wydajność. Wysoka jakość. Wyjątkowa wartość. Opracowany specjalnie pod kątem zastosowań w radiologii, ośrodkach obrazowania medycznego, placówkach ortopedycznych oraz na oddziałach pomocy doraźnej. Systemy DRX-Ascend oferują wiele funkcji i gwarantują pełną funkcjonalność w zakresie pozycjonowania przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości obrazu oraz bezpieczeństwa pacjenta.



CARESTREAM DRX Mobile Retrofit Kit

CARESTREAM DRX Mobile Retrofit Kit. Ostatni krok w ucyfrowieniu szpitala – aparat przytóżkowy (Siemens Moblilet, GE AMX4, inne aparaty) może być ucyfrowiony dzięki systemowi CARESTREAM DRX Mobile Retrofit Kit z detektorem DRX-1. Łatwy w instalacji zestaw do montażu i system integracji z aparatem przytóżkowym pozwala na otrzymanie obrazów jakości DR z urządzeń analogowych. Klienci, którzy już posiadają system DRX-1 mogą wykorzystać ten sam detektor do współpracy ze wszystkimi aparatami rentgenowskimi.

CARESTREAM DRX Revolution

CARESTREAM DRX Revolution. Mobilny aparat przytóżkowy DRX-Revolution to w pełni wyposażony gabinet rentgenowski na kółkach! Ponadprzeciętna jakość obrazu, łatwość przemieszczania i dodatkowe funkcje ułatwiają pracę. Nowy mobilny system DR posiada unikalną, składaną kolumnę zwiększającą zasięg widoczności, komfort i bezpieczeństwo podczas transportu systemu. Podwójny system jezdny oraz możliwość wykonania 360 stopniowego obrotu urządzenia w ciasnej powierzchni (np. sal operacyjnych, oddziałów intensywnej opieki czy izby przyjęć) ułatwia szybkie i prawidłowe ustawienie urządzenia.



DIRECTVIEW CR MAX. Zaawansowany wielosłotowy skaner radiografii cyfrowej Max CR, który pozwala na przetwarzanie w jednym urządzeniu kilku kaset jednocześnie. Wysoka wydajność systemu sprawia, że idealnie sprawdza się w dużych placówkach służby zdrowia, wykonujących po kilkaset ekspozycji w ciągu doby. System obejmuje skaner płyt obrazowych z podajnikiem kaset, czytnik kodów kreskowych oraz stację technika z monitorem 19 cali. Jest możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania.

DIRECTVIEW Classic/Elite CR. Łatwy w użytkowaniu system radiografii cyfrowej, niewielki i prosty w instalacji system Elite/Classic CR. Pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej jakości, a jego rozmiary sprawiają, że można go zainstalować wszędzie. System korzysta z monitora 17 cali lub monitora dotykowego 19 cali. System CR DIRECTVIEW Classic/Elite wykorzystuje standardowe rozmiary kaset – oraz 15x30 cm dla zdjęć stomatologicznych i 35x84 cm oraz 43x129 cm dla zdjęć długich części ciała, używanych w obrazowaniu skoliozy, kończyn i kości miednicy.

CARESTREAM System Vita CR. Należy do nowej generacji rozwiązań dla radiografii komputerowej, stworzonych na potrzeby małych i średnich ośrodków opieki zdrowotnej. CARESTREAM System Vita CR zapewnia szybki i łatwy dostęp do wysokiej jakości obrazów za przystępną cenę. Niewielkie rozmiary urządzenia pozwalają na przeprowadzanie obrazowania diagnostycznego w miejscu przebywania pacjenta. Możliwe jest też obrazowanie kości długich z pomocą kasety 35x84 cm.



DryView Chroma. Jedna drukarka. Wiele zastosowań. System obrazowania Carestream DryView Chroma umożliwia uzyskanie diagnostycznych i konsultacyjnych wydruków na kliszy lub papierze – w wysokiej jakości odcieniach szarości lub żywym, pełnym kolorze. Ogranicza koszty pracy, łącząc drukowanie na kliszy oraz papierze w jednym systemie, zapewniając jakość wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Zastosowania radiologiczne: PACS, CR, DR, CT, MR, PET/CT, USG, medycyna nuklearna i radioterapia.

DryView 5700. Nastółowa drukarka laserowa dedykowana do zastosowań ogólnodiagnostycznych dla urządzeń CR, DR, CR, MR, US typu DV5700. Ma rozdzielczość wydruku 325 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania danych, gęstość optyczną 3.1; wydajność 45 filmów/h formatu 35x43cm. Możliwość obsługi czterech formatów filmów. Dostępny jeden format online.

DryView 5850. Nastółowa drukarka laserowa dedykowana do mammografii cyfrowej typu DV5850. Ma rozdzielczość wydruku 508 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania obrazu, gęstość optyczną do 4.0; wydajność 125 filmów/h formatu 20x25 cm. Możliwość obsługi pięciu formatów filmów 35x43 cm, 35x35 cm, 28x35 cm, 25x30 cm i 20x25 cm. Dostępne są dwa formaty online.

DryView 6850. Uniwersalna drukarka laserowa o dużej wydajności wydruku typu DV6850. Ma rozdzielczość wydruku 650 dpi, 14 bitową architekturę przetwarzania obrazu, gęstość optyczną do 4.0; wydajność 230 filmów/h formatu 20x25 cm. Możliwość obsługi pięciu formatów filmów 35x43 cm, 35x35 cm, 28x35 cm, 25x30 cm i 20x25 cm. Dostępne są maksymalnie trzy formaty filmów online i opcjonalny sorter.

www.carestream.pl

DIRECTVIEW CR MAX

DIRECTVIEW Classic/Elite CR

CARESTREAM System Vita CR


DryView Chroma

DryView 5700

DryView 5850

DryView 6850

Vue

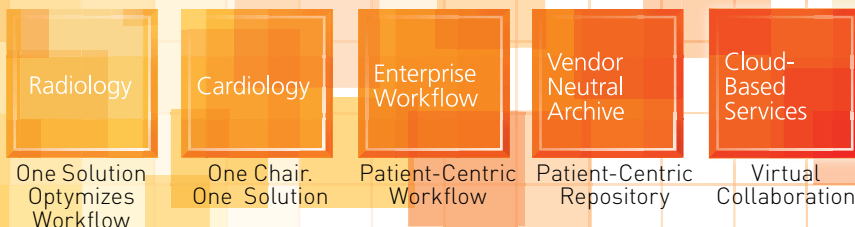

CARESTREAM VUE

PACS, RIS, zdalne archiwum i wiele więcej

Rozbudowany system informatyczny umożliwiający diagnozowanie, dystrybucję i archiwizację obrazów oraz informacji medycznych; Wykorzystana technologia internetowa umożliwia szybki i niezależny od miejsca przebywania dostęp do systemu; Integruje się z innymi systemami szpitalnymi oraz PACS-em każdego producenta; Bardzo rozbudowana funkcjonalność i wiele narzędzi klinicznych takich jak: 3D, kardiologia, radiologia, OrthoView, mammografia, kolonoskopia. Możliwość rozbudowy o kolejne wyspecjalizowane moduły; Wszystkie rodzaje badań danego pacjenta widoczne na jednym pulpicie; Skalowalność umożliwiająca dostosowanie do wielkości placówki i wymagań. PACS może połączyć w jednorodny system wiele jednostek medycznych w niezależnych lokalizacjach i używających rozmaitych programów PACS; Gwarancja najwyższej jakości dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wdrożeń w Polsce oraz w kilku tysiącach lokalizacji na świecie;



CARESTREAM VUE MOTION

Łatwy dostęp do zdjęć i wyników.

VUE Motion to system który umożliwia dostęp do badań diagnostycznych na urządzeniach mobilnych. Można go wdrożyć jako część rozwiązania Carestream, a ponieważ jest to rozwiązanie niezależne od konkretnego systemu PACS, można je integrować z archiwami PACS i DICOM produkcji innych dostawców. Intuicyjny układ minimalizuje potrzeby szkolenia, a przy zagnieżdżeniu w portalach typu EMR/HIS umożliwia szybkie przyswojenie. Nie ma potrzeby uczenia się obsługi różnych systemów lub wykonywania wielokrotnych logowań.



ROZWIĄZANIA MAMMOGRAFII CYFROWEJ



- CR DIRECTVIEW umożliwiający ucyfrowienie analogowego sprzętu i wykonanie zarówno badań mammograficznych, jak i radiologii ogólnej;
- Kasety mammograficzne z nowoczesnymi ekranami EHR M3 i SNP-M1 (igłowym);
- Stacje robocze CARESTREAM Mammography Workstation przeznaczone do różnego typu badań, niezależnie od producenta urządzeń obrazujących w mammografii (skanery, mammografy cyfrowe FFD, CT, MR), które umożliwiają radiologom zwiększenie wydajności ich pracy poprzez udostępnianie wszystkich obrazów klinicznych i danych pacjentów w dowolnym formacie na jednej stacji roboczej;
- Stacja robocza CARESTREAM PACS może zostać zintegrowana z systemami RIS/PACS pochodzącymi od różnych producentów;
- Drukarki DRYVIEW 5850 i DRYVIEW 6850 są dedykowane do wydruków badań mammograficznych oraz ogólnomedycznych;
- Sprzęt i oprogramowanie do archiwizacji badań.

Carestream

Carestream Health Poland Sp. z o.o., ul. Wyczółki 40, 02-820 Warszawa
tel. +48 22 465 55 71, fax +48 22 465 55 72, www.carestream.pl

Carestream

Carestream Health Poland Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 40, 02-820 Warszawa
tel. +48 22 465 55 71, fax +48 22 465 55 72
www.carestream.pl

KATALOG PRODUKTÓW 2012

A SMARTER WAY FORWARD.

