

WECHSELN SIE ZUR DR-BILDGEBUNG

Ein kostengünstiges Upgrade auf
vollständig digitales Röntgen.



LEISTUNGSSTARK. DIGITAL. WIRTSCHAFTLICH.

Jetzt können Sie mit dem PRO Retrofit-System so einfach und wirtschaftlich wie niemals zuvor von den umfangreichen Vorteilen der DR-Bildgebung profitieren. In nur wenigen Stunden können Sie Ihre auf Film oder CR basierenden Röntgengeräte auf die Geschwindigkeit und den Komfort einer vollständig digitalen Lösung umstellen.

Der PRO-Detektor ist vollständig mit Ihren vorhandenen Geräten – sowohl ganze Röntgenräume als auch mobile Systeme – von nahezu jedem Hersteller kompatibel. Sie müssen also Ihre aktuellen Systeme nicht ersetzen und gefährden auch nicht Ihre aktuellen Investitionen.

KOMPATIBILITÄT TRIFFT AUF WIRTSCHAFTLICHKEIT.

Das PRO Retrofit-System von CARESTREAM wurde zur Optimierung der von Ihnen aktuell eingesetzten Bildgebungsgeräte entwickelt. Es ist insbesondere mit Röntgensystemen kompatibel, die ISO 4090-kompatible 35x43-cm-Kassetten verwenden, genauso wie Film und CR. Sie müssen also nicht Ihren Generator oder Bucky modifizieren, Ihr Wandstativ, den Tisch oder Ihre Raster austauschen oder Ihre Arbeitsweisen radikal verändern. Damit sparen Sie jede Menge Geld. Das PRO Retrofit-System kann außerdem innerhalb eines einzigen Tages in Ihrem Untersuchungsraum oder an Ihrem mobilen System installiert werden.

Geschwindigkeit, Komfort und bessere Patientenversorgung

Das PRO Retrofit-System bietet auch die folgenden weiteren Vorteile:

- Die hervorragende Qualität der digitalen Bilder ermöglicht eine höhere Diagnosesicherheit.
- Wählen Sie entweder einen Gadolinium (GOS)-Szintillator für die allgemeine Röntgendiagnostik oder einen Caesium-(CSI)-Szintillator für strahlungsempfindliche Anwendungsbereiche.
- Die kabellose Option vermeidet den Aufwand und die Stolpergefahren einer Kabelinstallation, bietet einen verbesserten Infektionsschutz und minimiert Störungen intensivmedizinischer Geräte.
- Eine vollständig digitale Bilderfassung steigert die Produktivität durch eine verringerte Anzahl der Arbeitsschritte und verkürzt die Zeit der Bildbereitstellung.
- Durch die Beam-Sensing Technologie ist kein Kabelanschluss am Generator erforderlich. – Die Bildaufnahme beginnt automatisch, wenn der Detektor eine Röntgenbelichtung erkennt.



Das PRO Retrofit-System umfasst:

- Den kabellosen PRO 3543- oder den kabelgebundenen PRO 3543T-Detektor, mit einem Gadolinium- oder Caesium-Szintillator
- Eine optionale Desktop- oder Laptop-Konsole von Carestream
- Die bereits geladene Carestream Vxvue Software mit ImageSuite Mini-PACS-Modul
- Eine zuverlässige SCU für das Schnittstellenladegerät

Option für kabellose Produktivität

Die Option für den kabellosen Detektor des PRO Retrofit-Systems bietet:


- Kabellose Übertragung von digitalen Bildern direkt an Ihre Aufnahmekonsole
- Sofortige Bildbetrachtung und -bearbeitung
- Einfache Weiterleitung von der Konsole an Drucker oder PACS-Archive
- Leichtes, kabelloses Gerät für eine einfache Handhabung und eine flexible Positionierung

Das PRO Retrofit-System.
Jetzt wird Digitaltechnik wirtschaftlich.

Kabellose Konfigurationsoptionen für das PRO Retrofit-System

Option 1

Die Retrofit-Konfiguration umfasst eine Systemsteuerungseinheit (SCU), die ohne Netzwerkunterbrechungen ein kontinuierliches Signal an den Detektor sendet. Die SCU kann bis zu drei Detektoren steuern.

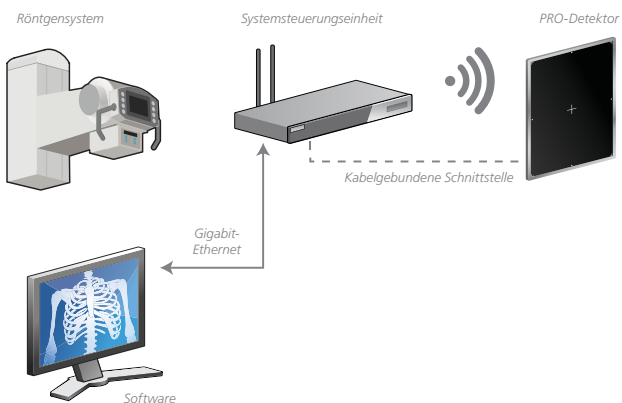

Option 2

Wenn Sie den AP des Detektors verwenden, können Sie Röntgenuntersuchungen direkt über eine WLAN-Verbindung an einen Computer oder Laptop übertragen.



EGAL, WELCHEN WEG SIE GEHEN,
WIR BRINGEN
SIE ANS ZIEL.

RICHTIG FÜR DIE GEGENWART.
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT.



Richtig für die Gegenwart. Bereit für die Zukunft.

Mit der Unterstützung von Carestream planen Sie den effizientesten Weg in Ihre Zukunft des Röntgens. Das skalierbare Design unserer Geräte und die modularen Komponenten bieten Ihnen hohe Leistungsfähigkeit in der Gegenwart verbunden mit unkomplizierten und kostengünstigen Upgrades für die Zukunft.

Lassen Sie uns die Migration Ihrer Geräte gemeinsam planen – Sie erhalten die Sicherheit, dass sich Ihre aktuelle Technologieinvestition auch in Zukunft weiterhin auszahlen wird.

Service- und Support-Community.

Wenn Sie zuverlässigen Service wünschen, dann sind Sie bei unserem Kundennetzwerk genau an der richtigen Adresse. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung der Bildgebungsleistung für unsere Kunden und unterstützen Sie bei Veränderungen Ihrer Anforderungen mit Innovationen, die Ihnen helfen, Ihr Budget und Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Das Kundennetzwerk von Carestream bietet Ihnen ein dynamisches Expertenteam und eine zentrale Anlaufstelle für den einfachen und individuellen Zugang zu den richtigen Spezialisten in jeder Situation. Sie und Ihre Patienten profitieren von den Vorteilen und besten Praktiken, die Carestream aus der Erfahrung von über 100 Jahren Innovation in der medizinischen Bildgebung und im Umgang mit Tausenden von Kunden weltweit entwickelt hat.



carestream.com

