

INNOVATION MOBILE.

Une nouvelle définition de la mobilité.



LA PUISSANCE DU X-FACTOR.

Ne soyez pas surpris, mais l'imagerie mobile ne sera plus jamais la même.

Le DRX-Revolution – comme toute la gamme DRX – repose sur la remarquable plate-forme de capteur Wi-Fi X-Factor. Grâce à elle, le même capteur peut être utilisé directement sur tous les produits de la gamme DRX, et même s'intégrer dans vos matériels existants.

Emportez le capteur DRX là où vous en avez le plus besoin. Utilisez-le avec le DRX-Revolution lors de vos tournées du matin, puis transférez-le dans un cabinet de radiologie au moment où les examens sont les plus nombreux.

L'approche X-Factor rend également facile et abordable la conversion, le remplacement ou le développement de vos systèmes actuels.





MOBILITÉ OPTIMALE.

Couloirs encombrés ? Ascenseurs bondés ? Chambres petites et surchargées ?

Aucun problème pour le DRX-Revolution. Le système est si compact et si facilement manœuvrable que vous le déplacez sans effort. Vous pouvez même lui faire faire demi-tour d'une seule main.

En outre, grâce à sa colonne rétractable automatiquement – une première dans la profession –, cette merveille de « profil bas » assure au manipulateur une visibilité totale pour atteindre sa destination plus vite, et plus sûrement.



DE MEILLEURS RÉSULTATS COMMENCENT PAR DE MEILLEURES IMAGES.

Au bout du compte, ce sont les images qui importent. Le niveau de contraste et de résolution d'une radiographie peut influencer directement sur le succès du traitement d'un patient. Vous pouvez faire confiance au DRX-Revolution pour vous apporter la qualité d'image que seule permet la technologie numérique Carestream.





L'IMAGERIE OPTIMISÉE.

Le DRX-Evolution comporte un système original d'alignement du tube et de la grille, qui donne des radiographies d'une superbe qualité et qui encourage l'utilisation de la grille. Un puissant générateur de 32 kW, un tube à double foyer et le traitement d'image EVP Plus s'associent pour une optimisation encore plus poussée des images. L'ensemble permet de réduire les reprises de clichés et favorise la rapidité et la précision du diagnostic.

Le DRX-Revolution permet également la visualisation d'images précédentes, notamment l'historique des techniques et de l'exposition grâce à sa capacité de demande et d'extraction .

Capacités personnalisées pour les USI et l'imagerie pédiatrique

Vous pouvez améliorer votre système grâce à un pack USI spécialisé permettant la visualisation du tube et des cathéters, qui fournit une image compagnon améliorée pour une visualisation claire du tube et des cathéters afin de vérifier le bon positionnement.

Le pack pédiatrique utilise un traitement d'image spécifique aux images pédiatriques. Il optimise la qualité d'image en appliquant des paramètres d'acquisition et de traitement spécifiques de la pédiatrie, qui suppriment le bruit interférant et rehaussent les détails en fonction de la taille du patient.

Détecteurs DRX de votre choix

Le détecteur DRX Plus 3543 – plus rapide, plus léger et plus fiable que le modèle précédent – utilise un scintillateur à oxy sulfure de gadolinium (GOS) pour les examens de radiologie générale.

Le détecteur DRX Plus 3543C utilise un scintillateur au Césium (CSI) pour des applications sensibles à la dose telle que la pédiatrie avec une Efficacité Quantique de Détection et MTF améliorées.

Le détecteur DRX 2530C est de conception plus petite, parfaite pour l'imagerie en pédiatrie – permettant le positionnement simple et rapide dans les plateaux d'incubation. Le 2530C est aussi un capteur idéal pour l'imagerie orthopédique.



NOUS SAVONS QUE CE N'EST PAS FACILE.

Et nous comprenons les défis et les changements auxquels vous devez désormais faire face afin de fournir des services de santé de qualité. La demande augmente, mais les restrictions budgétaires limitent les embauches et les achats de biens d'équipement. Parallèlement, la réglementation se resserre et les remboursements diminuent.

Il est clair qu'il vous faut obtenir le maximum d'efficacité et de valeur ajoutée de chaque personne, de chaque processus et de chaque matériel avec lesquels vous travaillez.





MOBILISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.

Avec le DRX-Revolution, vous allez améliorer votre méthode de travail et maximiser votre productivité. Il leur suffit de s'identifier à l'aide d'une carte, et vos manipulateurs sont à pied d'œuvre. L'utilisation est facile grâce à l'interface utilisateur intuitive. Une tête de tube à longue portée, du centre du chariot jusqu'à l'axe du faisceau de rayons X, permet un accès et un positionnement du patient plus faciles – mêmes dans les pièces encombrées.


Deux écrans tactiles permettent une visualisation rapide des images ou un changement de technique depuis la console ou le tube.

Pour vous aider à enfiler le sac de protection, le système maintient le capteur pour vous. En outre, cette « salle de radiologie mobile » comporte des rangements pour les gants, les batteries de rechange, les documents, les sacs, et un compartiment verrouillable pour le détecteur.



QUELLES QUE SOIENT VOS PERSPECTIVES,
NOUS VOUS MENONS
LÀ OÙ VOUS
SOUHAITEZ ARRIVER.

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

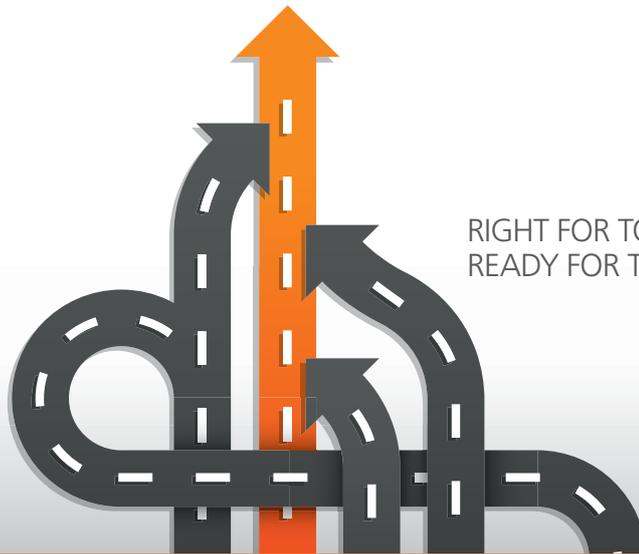

Right for Today. Ready for Tomorrow.

Carestream entend vous aider à définir la voie la plus efficace vers la radiographie que vous souhaitez développer. Notre conception axée sur l'évolutivité et une approche par modules implique un haut niveau de performance aujourd'hui et des mises à niveau simples et abordables dans les années à venir.

Planifions ensemble la migration de vos équipements – vous découvrirez que vos investissements technologiques actuels continueront de porter leurs fruits à long terme.

Une communauté de services et d'assistance

Pour une assistance fiable, consultez le réseau de réussite de notre clientèle. Nous nous efforçons en permanence d'améliorer votre performance en termes d'imagerie et de vous aider à innover pour répondre aux changements, tout en rentabilisant au maximum votre budget et vos ressources. Grâce au réseau Customer Success de Carestream, vous êtes encadré par une équipe dynamique composée d'experts, avec un point d'entrée unique permettant d'établir facilement un contact personnalisé avec les personnes adéquates, quelle que soit la situation. Vous et vos patients bénéficierez de l'expertise et des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir, grâce à des milliers d'engagements clients à travers le monde et à nos 100 ans d'expérience dans l'innovation en matière d'imagerie médicale.



carestream.com/drx-revolution

