



Maggiore chiarezza: una visualizzazione migliore di cannule e linee

La verifica del corretto posizionamento di cannule e linee è un aspetto fondamentale per la radiografia addominale e toracica al letto del paziente, soprattutto per pazienti in terapia intensiva. Ora, il nostro software proprietario di visualizzazione di cannule e linee CARESTREAM offre a Radiologi e Medici un maggiore livello di sicurezza. Compatibile con i sistemi CARESTREAM CR e DR nuovi e installati, questo software offre funzionalità di elaborazione delle immagini specializzate per una visualizzazione amplificata di cannule e linee, confermando che siano posizionati correttamente e che rimangano nella posizione corretta, con una sola esposizione.

Tube and Line Visualization Software CARESTREAM: un modo in più con cui Carestream aiuta a ottimizzare la cura dei pazienti e a ottenere risultati positivi.

VELOCE PANORAMICA SUI VANTAGGI


- Aumentate la sicurezza nel posizionamento dei tubi con un imaging chiaro e di facile lettura di cannule e linee
- Il software è semplice da installare, facile da usare
- Velocizza il flusso di lavoro e aumenta la produttività
- Compatibile con sistemi CR e DR CARESTREAM




Tube and Line Visualization Software

Design innovativo

Questa opzione di software integra l'immagine diagnostica tradizionale di una struttura anatomica con un'*immagine aggiuntiva*, con un'unica esposizione. Viene conservata l'integrità completa dell'immagine diagnostica, mentre l'immagine aggiuntiva viene ottimizzata per evidenziare cannule e linee PICC. Ciò consente una conferma affidabile del corretto posizionamento di cannule e linee, che a sua volta migliora la sicurezza diagnostica.

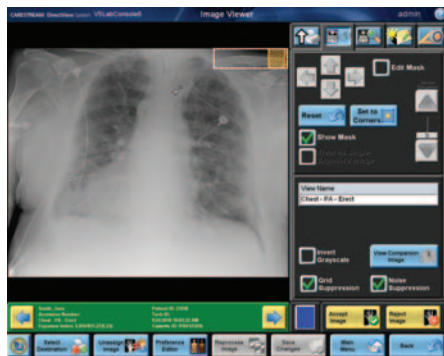

L'immagine diagnostica offre una proiezione ottimale delle strutture anatomiche per scopi diagnostici.

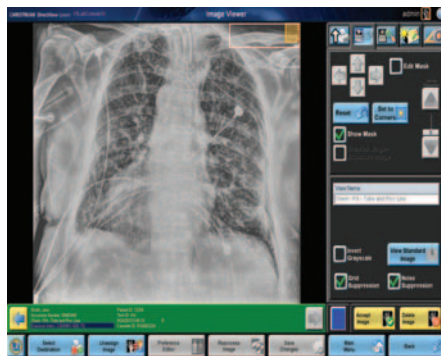

L'immagine aggiuntiva viene elaborata per migliorare la latitudine e la nitidezza, consentendo una visualizzazione più precisa della posizione di cannule e linee.

Facilità d'uso

L'operatore seleziona quali esami e proiezioni genereranno automaticamente immagini aggiuntive ottimali: non è necessario resettare questa funzione per ogni esame, o agire con finestra o livello, e ciò aumenta quindi la produttività. L'immagine diagnostica può inoltre essere inviata automaticamente al PC, con o senza immagine aggiuntiva. Per consentire all'operatore di risparmiare tempo e velocizzare il flusso di lavoro, i marker usati sull'immagine diagnostica sono replicati *automaticamente* sull'immagine aggiuntiva.

Qualità ineguagliabile

Per potenziare le funzionalità di lettura, gli operatori possono passare dall'immagine diagnostica a quella aggiuntiva e viceversa, che appare con la registrazione esatta. L'accettazione o il rifiuto di un'immagine aggiuntiva non influenza le statistiche, preservando così l'integrità delle misure del reparto.

Una vasta gamma di proiezioni aggiuntive

È possibile selezionare più proiezioni aggiuntive per parti del corpo e tipi di esame con cannule e linee comuni.

- AP addome
- AP torace
- Addome pediatrico
- AP torace pediatrico
- AP addome portatile
- AP torace portatile

Specifiche del prodotto

Questa opzione di software può essere eseguita su:

- DIRECTVIEW Classic, Elite e Max CR con DIRECTVIEW V5.4 o versione successiva.
- DRX-1 e DRX-1C in sala con DIRECTVIEW V5.3 o versione successiva.
- DRX-Evolution con DIRECTVIEW V5.3 o versione successiva.
- DRX-Mobile Retrofit Kit con DIRECTVIEW V5.3 o versione successiva.

Tube and Line Visualization Software è disponibile anche come upgrade per i sistemi DIRECTVIEW CR 825, 850, 950, 975 con sw V5.4 o versione successiva.



Maggiori informazioni? Visitare www.carestream.com

Carestream