

INNOVAZIONE IN MOVIMENTO.

Mobilità ridefinita.



IL POTERE DELL'X-FACTOR.

Non è ancora evidente, ma l'imaging mobile è stato cambiato per sempre.

DRX-Revolution – come l'intera Linea DRX – è pensato sulla base dell'importante piattaforma X-Factor con detettori wireless. Questo permette allo stesso detettore di operare in modo lineare sull'intera gamma di prodotti DRX – può anche essere inserito direttamente nelle vostre apparecchiature esistenti.

Impiegate il Detettore DRX Plus là dove è più necessario. Utilizdatelo in DRX-Revolution per i giri mattutini, quindi spostatelo in una suite di radiologia durante gli orari di esami più affollati.

Il concetto X-Factor rende facile e conveniente convertire, sostituire o espandere i sistemi attuali.





MASSIMA MOBILITÀ.

Attività frenetica nei corridoi? Ascensori impegnati? Sale pazienti piccole e con poco spazio?

Nessun problema per DRX-Revolution. Il sistema è così compatto e manovrabile che lo si può spostare senza sforzo; può eseguire facilmente una rotazione completa guidato con una sola mano.


Inoltre, il profilo compatto di questa meraviglia offre ai Tecnici una visuale libera, grazie alla colonna collassabile automatica, la prima nel settore. Si può arrivare più rapidamente dove è necessario e in maniera più sicura.



ESITI MIGLIORI COMINCIANO CON IMMAGINI MIGLIORI.

In fin dei conti, sono le immagini che contano. Il grado di chiarezza e di risoluzione di una radiografia può influire direttamente sull'esito positivo per il paziente. Potete contare su DRX-Revolution per una qualità d'immagine che solo la tecnologia digitale di CARESTREAM può fornire.



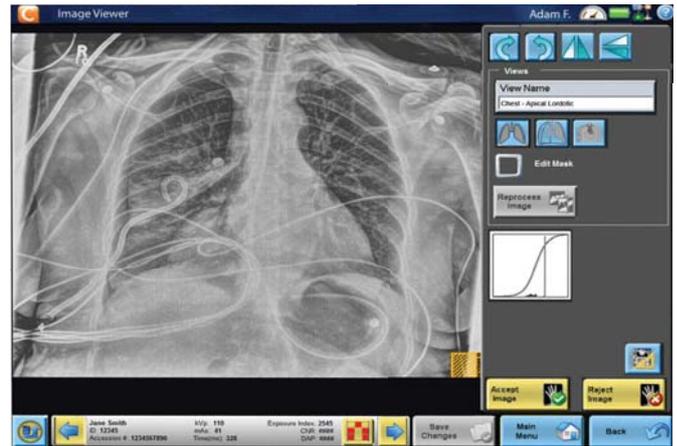

IMAGING OTTIMIZZATO.

DRX-Revolution è caratterizzato da uno speciale sistema di allineamento del tubo e della griglia che fornisce un'eccellente qualità radiografica e favorisce l'utilizzo delle griglie. La combinazione di un potente generatore da 32 kW, di un tubo radiogeno a doppia macchia focale e del software di elaborazione d'immagine EVP Plus ottimizza ulteriormente le immagini. Questo si traduce in una riduzione del rischio di ripetizioni e contribuisce a diagnosi più rapide e più accurate.

Il DRX-Revolution offre anche la revisione delle immagini precedenti, comprese le tecniche e la storia di esposizione, con funzionalità query/retrieve basata su PACS.

Funzionalità personalizzate per imaging UTI e pediatrico

È possibile migliorare il sistema con un pacchetto per terapia intensiva specializzato che include la funzionalità Tube and Line Visualization, che fornisce un'immagine abbinata potenziata per una visione chiara di linee di tubi e PICC per verificare il corretto posizionamento.

Il pacchetto Pediatrico utilizza l'elaborazione delle immagini specifica per le viste pediatriche. È progettato per ottimizzare la qualità d'immagine utilizzando parametri di acquisizione e di elaborazione specifici pediatrici per la soppressione del rumore e per il miglioramento dei dettagli secondo la corporatura del paziente.

La vostra scelta di Detettori DRX

Il Detettore DRX Plus 3543, ancora più rapido, leggero e affidabile del modello precedente, utilizza uno scintillatore al gadolinio (GOS) per l'imaging radiografico generico.

Il Detettore DRX Plus 3543C offre uno scintillatore al cesio (CSI) per applicazioni dose-sensibili, come quelle pediatriche, con DQE e MTF maggiori.

Il Detettore DRX 2530C presenta un design in formato ridotto, ideale per l'imaging pediatrico, consentendo un posizionamento rapido e semplice nei vassoi dell'incubatore. Il 2530C è ideale anche per l'imaging ortopedico.



SAPPIAMO CHE NON È SEMPLICE.

E capiamo le sfide e i cambiamenti che si affrontano oggi nella fornitura di servizi sanitari di qualità. Le richieste aumentano, ma budget restrittivi limitano le assunzioni e gli investimenti in apparecchiature. Allo stesso tempo, le norme stanno diventando più severe e i rimborsi diminuiscono.

Chiaramente, avete la necessità di ottenere nella vostra organizzazione il massimo di efficienza e di valore da tutto: persone, processi e apparecchiature.





MOBILITATE LA PRODUTTIVITÀ.

DRX-Revolution migliora il vostro workflow e incrementa notevolmente la produttività. Si attiva semplicemente passando un badge: i vostri Tecnici sono direttamente operativi. L'intuitiva interfaccia grafica ne facilita l'utilizzo. Una testa del tubo a lunga portata, dal centro del carrello all'asse del fascio radiografico, consente un migliore accesso al paziente e un posizionamento più accurato - anche in sale affollate.

Due display touchscreen consentono una revisione rapida dell'immagine o modifiche alla tecnica dalla console o dal tubo. Il sistema sostiene il dettore per un facile inserimento nelle buste di protezione da parte dell'operatore. Inoltre, questa "sala radiografica su ruote" è dotata di scomparti integrati per guanti, batterie supplementari, marker, buste di protezione e di un alloggiamento bloccabile di sicurezza per il dettore.



PER OGNI PERCORSO INTRAPRESO,
VI CONDURREMO ALLA
META DA VOI STABILITA.

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.



Right for Today. Ready for Tomorrow.

Carestream è pronta ad aiutarvi a pianificare il percorso più efficace verso il vostro futuro nell'imaging radiografico. Il design scalabile delle nostre apparecchiature e i componenti modulari si traducono in performance elevate oggi e in upgrade facili ed economicamente convenienti negli anni a venire.

Pianifichiamo insieme la migrazione delle vostre apparecchiature – conseguirete la fiducia che l'attuale investimento tecnologico continuerà a risultare profittevole anche in futuro.

Una comunità di servizio e supporto

Per un'assistenza e un supporto affidabile, considerate il Customer Success Network. Lavoriamo continuamente per migliorare le vostre performance di imaging, aiutandovi a innovare di pari passo con l'evoluzione delle esigenze e a ricavare il massimo dal vostro budget e dalle vostre risorse. Il Carestream Customer Success Network opera per voi con un dinamico team di esperti attraverso un Punto Unico di Accesso, che permette di mettersi in contatto in modo facile e personalizzato con le persone giuste in ogni situazione. Voi e i vostri pazienti beneficerete dell'esperienza, delle conoscenze e delle pratiche migliori che solo Carestream è in grado di fornire, fondate su migliaia di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 100 anni di attività nell'innovazione per l'imaging medicale.



carestream.com/drx-revolution

