

WSZECHSTRONNE DRUKOWANIE NA KLISZY LUB PAPIERZE


Jedna z najbardziej zaufanych marek w dziedzinie wydruków medycznych oferuje teraz wysoce wszechstronną drukarkę, która daje całkowicie nowe możliwości lekarzom i innym pracownikom opieki zdrowotnej.

System obrazowania Carestream DRYVIEW Chroma umożliwia uzyskanie diagnostycznych i konsultacyjnych wydruków na kliszy lub papierze — w wysokiej jakości odcieniach szarości lub żywym, pełnym kolorze. Ogranicza koszty pracy, łącząc drukowanie na kliszy oraz papierze w jednym systemie, zapewniając jakość wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.



PROSTE. WSZECHSTRONNE



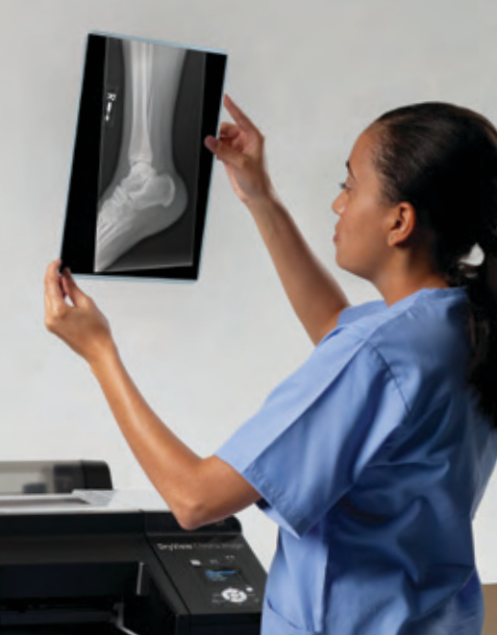

JEDNA DRUKARKA. WIELE ZASTOSOWAŃ.

ZDUMIEWAJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ

Potężna drukarka. Zaufana marka.

Drukarka DRYVIEW Chroma jest idealna dla radiologów, lekarzy innych specjalności i stomatologów oraz każdego, kto podczas opieki nad pacjentem potrzebuje precyzyjnych informacji. Niskie koszty eksploatacyjne, prosta obsługa i duża wszechstronność sprawiają, że nadaje się ona idealnie do szerokiego zakresu zastosowań. Zaufane marki — Carestream i DRYVIEW SPRAWIAJĄ, że drukarka wpisuje się w dziedzictwo jakości, wartości oraz dostępnego na całym świecie wsparcia technicznego reagującego na potrzeby użytkowników. Prostota i ekonomia sprawiają, że ta nowa drukarka nabiurkowa idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Papier lub klisza. Kolor lub skala szarości.

WIELE ZASTOSOWAŃ.

Zastosowania radiologiczne:

PACS, CR, DR, CT, MR, PET/CT, USG, medycyna nuklearna i radioterapia


Zastosowania stomatologiczne:

Obrazowanie panoramiczne, cefalometryczne, 3D i cyfrowa radiografia w obrębie jamy ustnej

ZAAWANSOWANA WIZUALIZACJA W OBRAZOWANIU MEDYCZNYM:

Renderowanie objętości 3D,
mapowanie koloru i analiza
naczyń



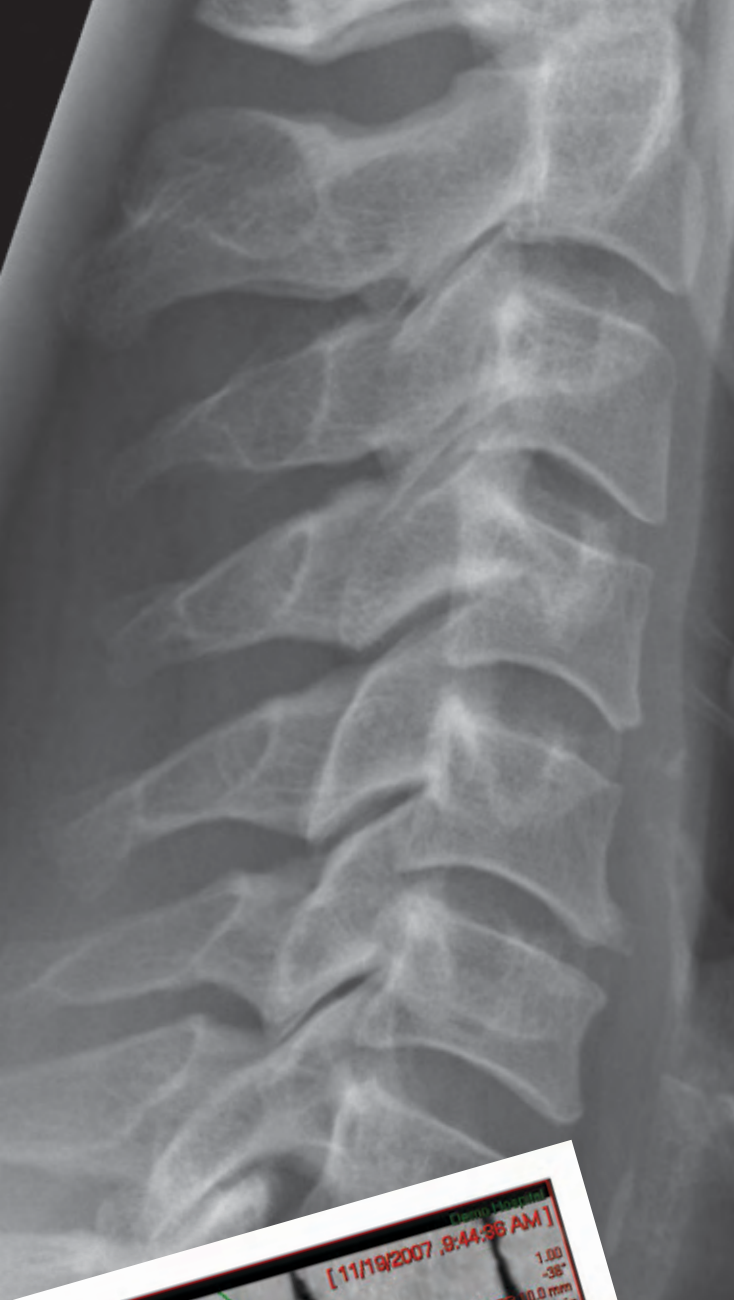


WYGODNE DRUKOWANIE — KONIEC Z CZEKANIEM NA ZDJĘCIA DIAGNOSTYCZNE.

Drukarka DRYVIEW Chroma daje lekarzom dostęp do wydruków, gdy chcą dokonać konsultacji w gabinetach, miejscach badań lub poczekalniach. Wydruki na kliszy i papierze dostarczają także niezbędnych informacji podczas zabiegów chirurgicznych i innych. Dostępny wszędzie wydruk obrazów i raportów.

BŁYSKAWICZNE WYDRUKI DOSTĘPNE NA PAPIERZE LUB KLISZY — ZAWSZE, GDY WYMAGANE SĄ OBRAZY DIAGNOSTYCZNE.


Wszechstronność drukarki DRYVIEW Chroma pozwala oddziałom radiologii ograniczać koszty kapitałowe i eksploatacyjne, łącząc wydruki na kliszy i papierze w jednym systemie obrazowania.

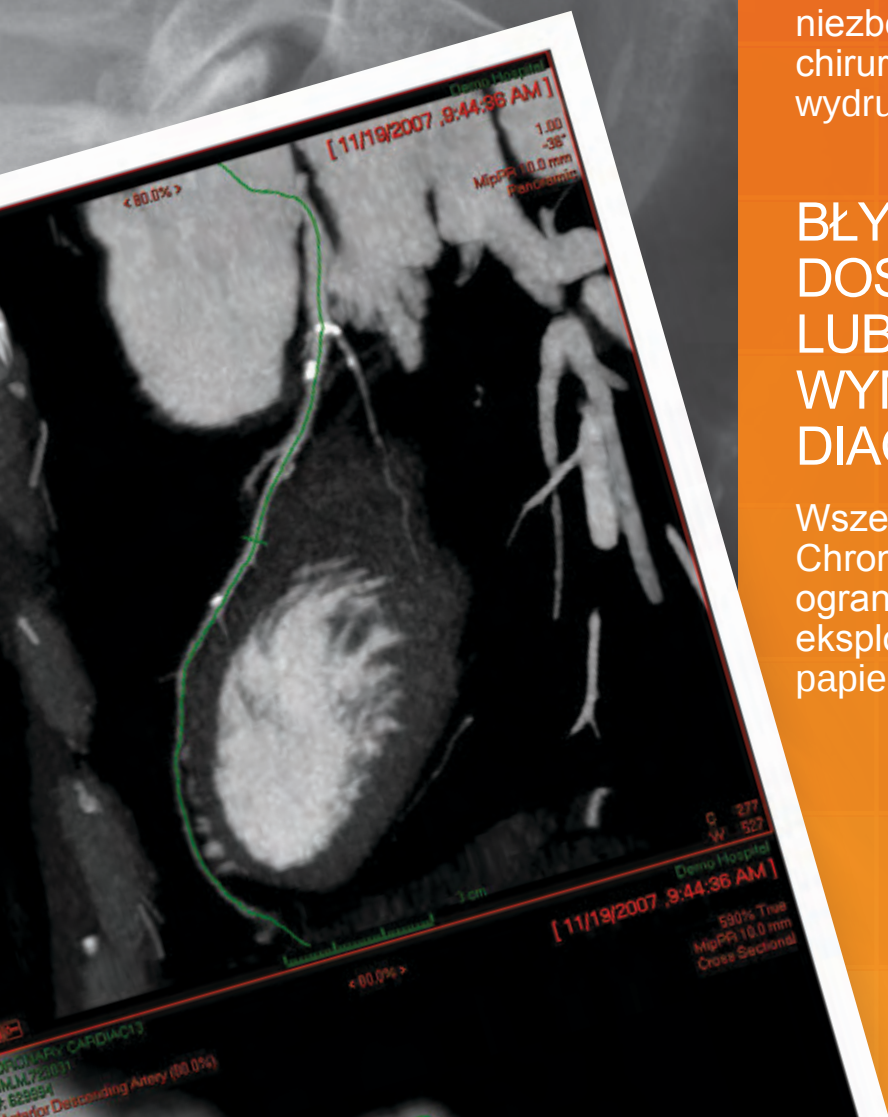

ZASTOSOWANIA SPECJALISTYCZNE


Drukarka DRYVIEW Chroma dostarcza papierowych raportów do celów konsultacyjnych, wspierając szeroki zakres zastosowań specjalistycznych, takich jak:

Stomatologia
Dermatologia
Neurologia
Położnictwo i ginekologia
Onkologia
Ortopedia
Patologia
Radiologia
Reumatologia
Chirurgia
Urologia

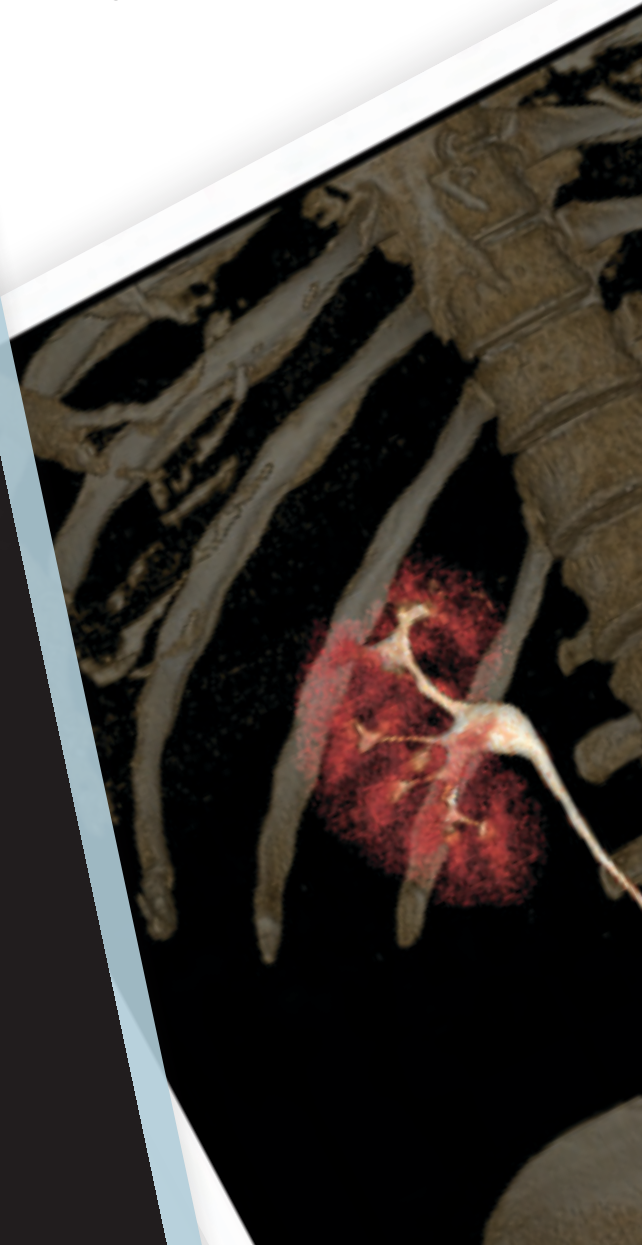

WYDRUKI KONSULTACYJNE — WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRAZY WYDRUKOWANE NA PAPIERZE DLA LEKARZY W CELU DOŁĄCZENIA DO RAPORTÓW.

Zakłady radiologii mogą wykorzystać drukarkę do zapewnienia lekarzom nowych, potężnych narzędzi konsultacyjnych. Teraz jeszcze prościej na wybranym nośniku — papierze lub kliszy.

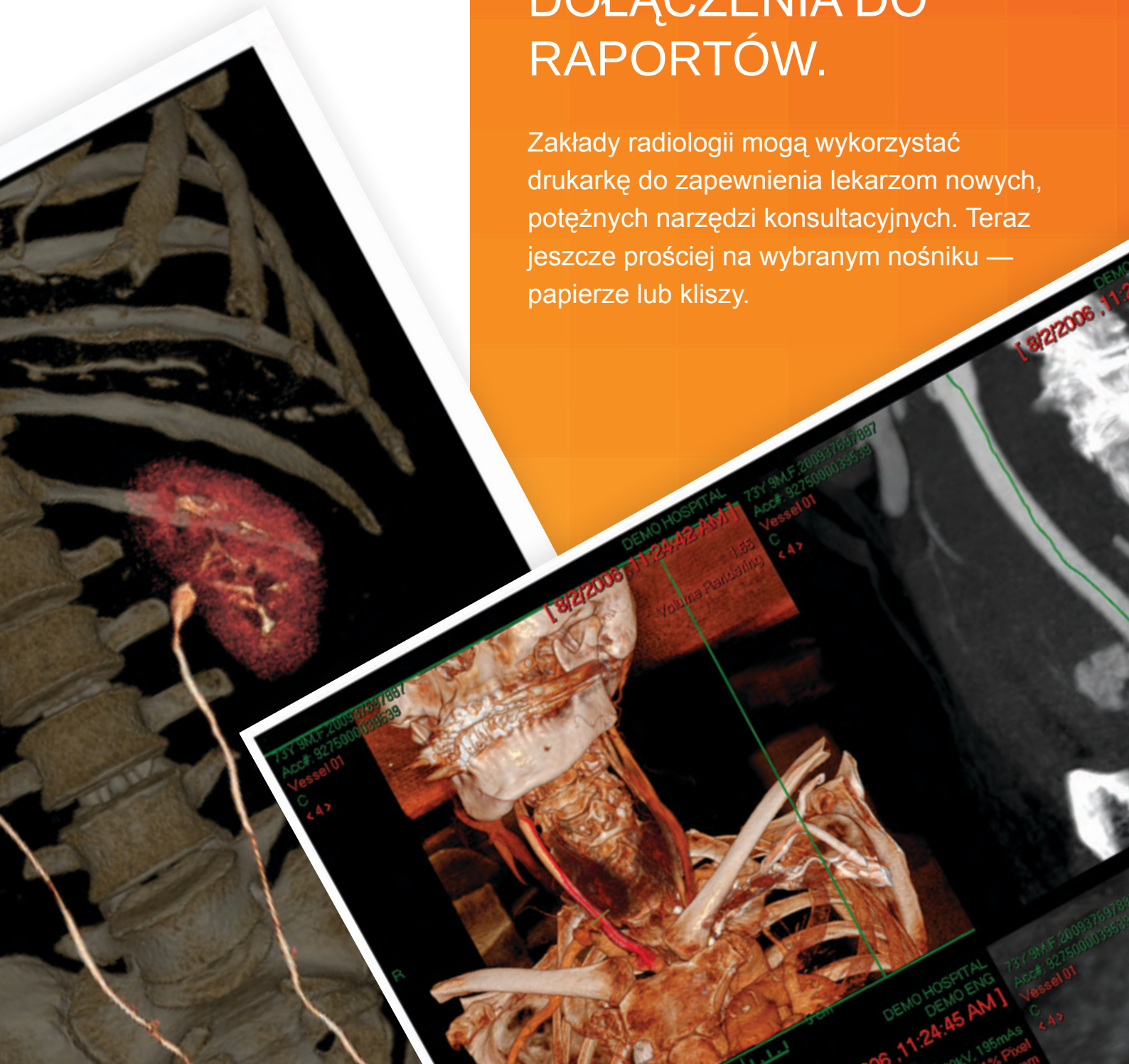



System obrazowania DRYVIEW CHROMA

Wygodne, ekonomiczne drukowanie

Drukarka DRYVIEW Chroma jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla zakładów radiologii, szpitali, gabinetów prywatnych, klinik i ośrodków obrazowania medycznego oraz wszędzie tam, gdzie do diagnostyki wykorzystywane są klisze lub monitory. Prostota i ekonomia czynią z tej nowej drukarki nabiurkowej biurkowej perfekcyjne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Produktywne i niezawodne rozwiązanie

Drukarka DRYVIEW Chroma drukuje do 50 arkuszy papieru na godzinę — doskonałej jakości obrazów kolorowych lub w skali szarości. Dzięki konstrukcji odpowiedniej do zastosowań biurowych drukarkę z łatwością można ustawić wszędzie tam, gdzie potrzebne są wydruki na papierze lub na kliszy.

Idealna do drukowania z PACS lub EMR

Niskie koszty eksploatacyjne i wszechstronność czynią z drukarki DRYVIEW Chroma bezproblemowe urządzenie do drukowania obrazów z PACS lub wzbogaconych w obrazy elektronicznych rejestrów medycznych na papierze lub kliszy. Ponieważ wymiana informacji medycznej (ang. Health Information Exchanges, HIE) umożliwia elektroniczną wymianę informacji medycznych w obrębie kraju, regionu lub szpitala, wymogi dotyczące drukowania obrazów medycznych ewoluują. Drukarka DRYVIEW Chroma dzięki niskim kosztom eksploatacji i doskonałej jakości druku jest perfekcyjnie dopasowana do zmieniających się wymagań.

Szerokie możliwości podłączania

Drukarka DRYVIEW Chroma jest zgodna z systemami CR, DR, CT, MR, PACS i EMR i wieloma innymi. Umożliwia to zapewnienie wysokiej jakości wydruków na kliszy lub papierze praktycznie z dowolnego miejsca, gdzie są potrzebne.

Łatwość instalacji


Dzięki prostej instalacji i intuicyjnej obsłudze wymagane jest tylko minimalne szkolenie użytkownika. Łatwa obsługa zapewnia także, że system można wdrożyć bez długiej przerwy w codziennym toku pracy.

Uproszczony serwis

Niezawodność drukarki DRYVIEW Chroma znacznie ułatwia pracę i minimalizuje wymagania dotyczące serwisowania. Opcjonalne usługi zdalnego zarządzania (ang. Remote Management Services, RMS) ostrzegają specjalistów z firmy Carestream, że system wymaga sprawdzenia.

Wybór uzasadniony względami środowiskowymi i ekonomicznymi

Drukarka DRYVIEW Chroma jest zgodna z normą ENERGY STAR opracowaną przez Agencję Ochrony Środowiska USA (ang. Environmental Protection Agency, EPA). Energooszczędność drukarki ogranicza koszty energii i zmniejsza całkowity koszt pozyskania.

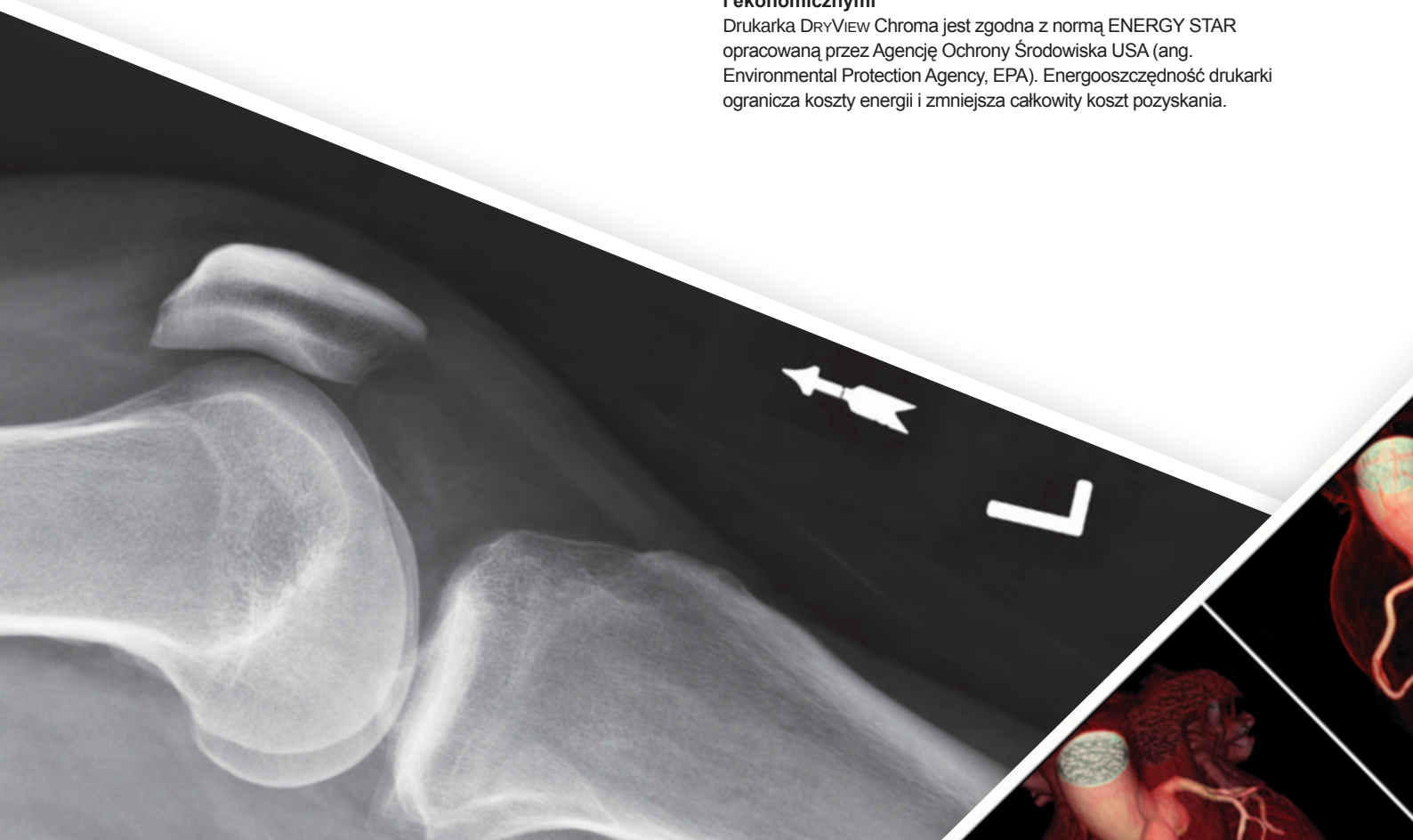




WYDRUKI DIAGNOSTYCZNE

Drukuj obrazy diagnostyczne na kliszy.



WYDRUKI KONSULTACYJNE

Drukuj wysokiej jakości obrazy na papierze w celu dołączenia ich do raportów.

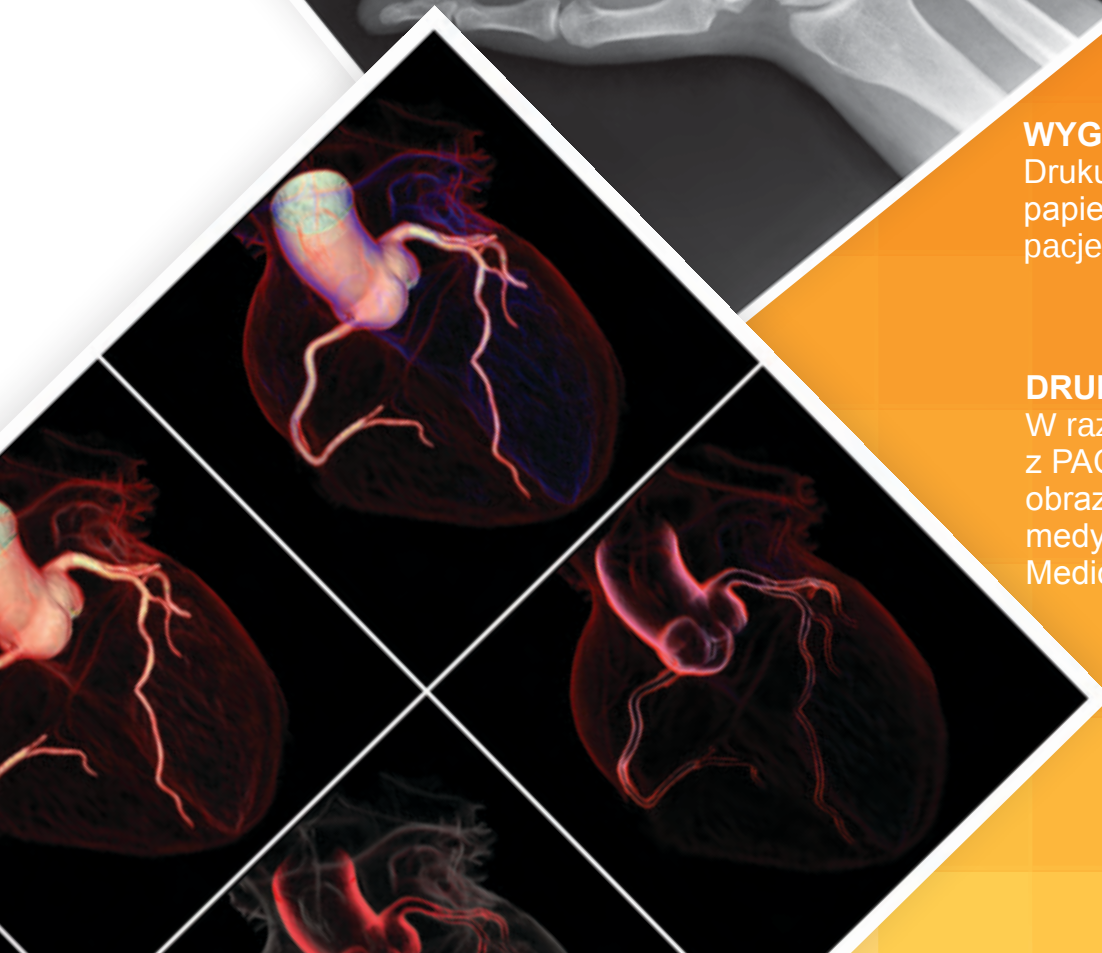

WYGODNE DRUKOWANIE

Drukuj wszędzie na kliszy lub papierze, aby konsultować pacjentów.

DRUKOWANIE KORPORACYJNE

W razie potrzeby drukuj obrazy z PACS lub wzbogaconych w obrazy elektronicznych zapisów medycznych (ang. Electronic Medical Records, EMR)!

DANE TECHNICZNE PRODUKTU



SYSTEM OBRAZOWANIA DRYVIEW CHROMA

Technologia

- 10-kanalowa głowica atramentowa z wyrzutem kropli na żądanie
- 11 wkładów z tuszem pigmentowym

Rozdzielczość

- 360 pikseli na cal

Nośniki wydruku

- Klisza medyczna DRYVIEW Chroma
35 x 43 cm
28 x 35 cm
25 x 30 cm
20 x 25 cm
- Papier medyczny DRYVIEW Chroma - błyszczący
A3 (297 x 420 mm)
A4 (210 x 297 mm)
- Papier medyczny DRYVIEW Chroma - matowy
A3 (297 x 420 mm)
A4 (210 x 297 mm)
- Papier do zastosowań medycznych DRYVIEW Chroma - błyszczący/rolka 297 mm x 75 m; arkusze przycięte do rozmiaru A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm)
- Papier do zastosowań medycznych DRYVIEW Chroma - matowy/rolka 297 mm x 100 m; arkusze przycięte do rozmiaru A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm)

Wymagania elektryczne

DRUKARKA:

- Napięcie: AC 110–240 V
- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Prąd: 1,0 A / 110–120 V
- Zgodność z normą ENERGY STAR

INTERFEJS DICOM:

- Napięcie: AC 100–240 V
- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Prąd: 1,5 A

Łączność sieciowa

- Obsługa formatu plików DICOM przez sieć Ethernet*
- Połączenie do drukarki Ethernet BaseT 10/100/1000 (obsługa ramek jumbo)

Obsługa klas DICOM SOP*

- Podstawowa klasa zarządzania wydrukiem skali szarości Meta SOP
- Klasa zarządzania wydrukiem kolorowym Meta SOP
- Klasa prezentacji LUT SOP
- Klasa pola adnotacji podstawowych SOP
- Klasa weryfikacji SOP

Środowisko pracy

- Temperatura: od 50°F do 86°F (od 10°C do 30°C)
- Wilgotność: od 20 do 70% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Obsługiwane Systemy Operacyjne

- Windows XP, Vista i Windows 7 (32-bitowe)

Warunki przechowywania

- Temperatura: od -4°F do 140°F (od -20°C do 60°C)
- Wilgotność: od 5 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Wymiary/masa

DRUKARKA:

- Wysokość: 41 cm (16 cali)
- Szerokość: 86 cm (34 cale)
- Głębokość: 77 cm (30 cali)
- Masa: 52 kg (114,4 funta)

INTERFEJS DICOM:

- Wysokość: 20,3 cm (8 cali)
- Szerokość: 10,2 cm (4 cale)
- Głębokość: 20,3 cm (8 cali)
- Masa: 2 kg (4,4 funta)



Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy
Carestream WWW.carestream.pl lub odwiedzając witrynę dryview.carestream.com

Carestream

© Carestream Health, Inc., 2012. Carestream i DryView są znakami towarowymi firmy Carestream Health.
Wydrukowano w USA. 9/12 Nr kat. 400 0102_PL

*Oświadczenie o zgodności z DICOM jest dostępne pod adresem www.carestreamhealth.com/dicom.html